




SHERPA 908

(04090001)

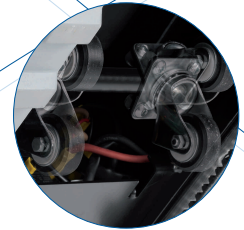

ÚNICO
EN EL
MERCADO

Wheelssystem

Ruedas giratorias motorizadas que permiten giros de 360°

Tillersystem

Timón eléctrico que permite maniobrar sin esfuerzo y reduce el espacio de maniobra.

La SHERPA 908, es la oruga salva escaleras que ayuda al acompañante de los usuarios de sillas de ruedas a subir y/o bajar escaleras rectas en espacios aún más estrechos. Aporta un confort extra, gracias al timón eléctrico.

SEGURO

Gracias a que la liberación y control de seguridad están situados en el manillar. Pestaña curvada patentada para un agarre más firme. Batería de 24V que garantiza una mayor durabilidad y duración.

MAYOR MANIOBRABILIDAD

Gracias al Wheel System y Tiller System puede maniobrar en tan solo 98 x 95 cm.

MAYOR CONFORT

Gracias al timón eléctrico, se evitan sobre esfuerzos en el cuidador, facilitando la basculación del usuario.



DIMENSIONES Y PESOS

SHERPA 908
 (04090001)

Dimensiones min. SHERPA (largo x ancho):	940 x 450 mm
Peso con baterías:	54,5 kg
Unidades por caja exterior:	1
Dimensión de la caja exterior (largo x ancho x alto):	1140 X 700 X 500 mm
Peso total de la caja exterior:	62 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SHERPA 908
 (04090001)


Peso máximo soportado:	130 kg
Peso timón:	12 kg
Basculación del timón:	Eléctrico
Tipo motor:	220W-24V (925 rpm)
Altura max. del escalón:	23 cm
Anchura min. del escalón:	80 cm
Espacio min. de maniobra:	89 x 95 cm
Velocidad (metros/min.):	5,5 metros
Autonomía:	40 pisos
Autonomía en reserva:	4 pisos
Inclinación max.:	35°
Cargador:	110-230V
Botón bloqueo:	Ubicado en el timón
Soporte inferior para silla de ruedas:	Plegables
Movimiento sobre el suelo:	Sistema con 4 ruedas auto-balanceables y 2 ruedas giratorias



Transportable en piezas.

ACCESORIOS

04090018: Barra ajustable (46-60 cm)

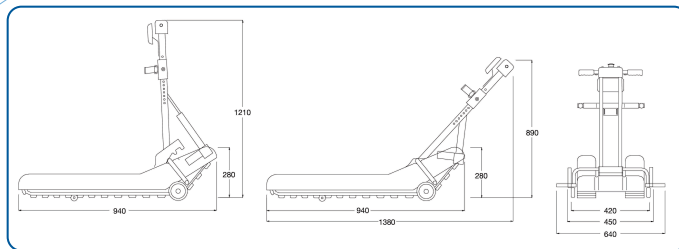

Medidas Sherpa 905-907

GARANTÍA

- SHERPA: 2 años*
- Baterías: 6 meses*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

CERTIFICADOS

