




SHERPA 909 / 909R / 909TM

(04090013 / 04090014 / 04090015)

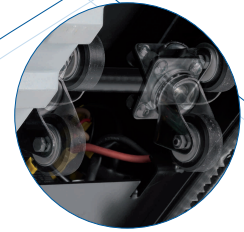

Wheelsystem

Ruedas giratorias motorizadas que permiten giros de 360° en espacios reducidos (modelos: 909R y 909TM).

Tillersystem

Timón eléctrico que permite maniobrar sin esfuerzo y reduce el espacio de maniobra (modelo: 909TM).

La SHERPA 909, es la oruga salva escaleras que ayuda al acompañante de los usuarios de sillas de ruedas eléctricas a subir y/o bajar escaleras rectas, gracias a sus rampas de aluminio antideslizantes.



SEGURO

Gracias a que la liberación y control de seguridad están situados en el manillar. **Pestaña curvada patentada** para un agarre más firme. Batería de 24V que garantiza una mayor durabilidad y duración.

POTENTE

El modelo 909 soporta 150 kilos de peso.

ADAPTABLE

A todo tipo de sillas eléctricas, gracias a sus rampas de aluminio antideslizantes de acero anodizado.

VERSIONABLE

Disponible en configuración básica (909), con ruedas giratorias - Wheel System (909R) y/o timón eléctrico - Tiller System (909TM).

DIMENSIONES Y PESOS

| | SHERPA 909 (04090013) | SHERPA 909R (04090014) | SHERPA 909TM (04090015) |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Dimensiones min. SHERPA (largo x ancho): | 940 x 450 mm | 940 x 450 mm | 940 x 450 mm |
| Peso con baterías: | 66,5 kg | 68 kg | 69,5 kg |
| Unidades por caja exterior: | 1 | 1 | 1 |
| Dimensión de la caja exterior (largo x ancho x alto): | 1340 X 700 X 500 mm | 1340 X 700 X 500 mm | 1340 X 700 X 500 mm |
| Peso total de la caja exterior: | 83 kg | 83 kg | 83 kg |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


| | SHERPA 909 (04090013) | SHERPA 909R (04090014) | SHERPA 909TM (04090015) |
|--|---|---|---|
| Peso máximo soportado: | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Peso timón: | 11 kg | 11 kg | 12,5 kg |
| Basculación del timón: | Manual | Manual | Eléctrico |
| Tipo motor: | 180W-24V (2500 rpm) | 180W-24V (2500 rpm) | 180W-24V (2500 rpm) |
| Altura max. del escalón: | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Anchura min. del escalón: | 110 cm | 110 cm | 110 cm |
| Espacio min. de maniobra: | 120 x 120 cm | 120 x 120 cm | 120 x 120 cm |
| Velocidad (metros/min.): | 5,5 metros | 5,5 metros | 5,5 metros |
| Autonomía: | 35 pisos | 35 pisos | 35 pisos |
| Autonomía en reserva: | 3 pisos | 3 pisos | 3 pisos |
| Inclinación max.: | 35° | 35° | 35° |
| Cargador: | 110-230V | 110-230V | 110-230V |
| Botón bloqueo: | Ubicado en el timón | Ubicado en el timón | Ubicado en el timón |
| Soporte inferior para silla de ruedas: | Fijos | Fijos | Fijos |
| Movimiento sobre el suelo: | Sistema manual con 4 ruedas auto-balanceables | Sistema manual con 4 ruedas auto-balanceables y 2 ruedas giratorias | Sistema manual con 4 ruedas auto-balanceables y 2 ruedas giratorias |

ACCESORIOS

04090018: Barra ajustable (46-60 cm)



Modelo 909TM

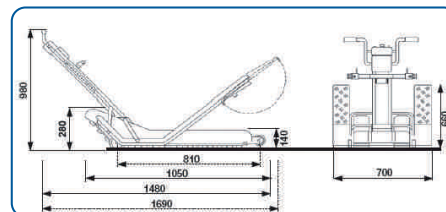

Medidas Sherpa 909

CERTIFICADOS



GARANTÍA

- **SHERPA:** 2 años*
- **Baterías:** 6 meses*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.